


Art. 7150	IT.	Supporto multiplo per tubi e sonde d'infusione
	EN.	Holder multiple for tubes and infusion probes
	ES.	Soporte para múltiples tubos y sondas de infusión

Codice Articolo	7150
Misura	Taglia unica, regolabile
N° Repertorio	1480169
Codice CND	M04010299

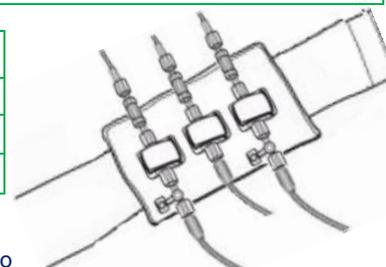

Caratteristiche

Ausilio realizzato per fissare tubi, sonde, cateteri e trasduttori d'infusione consentendo il corretto e controllato posizionamento. Idoneo per impiego prevalentemente sull'arto superiore.

Impiego

Dispositivo destinato prevalentemente al posizionamento sull'arto superiore, nella zona omerale.

Target

Reparti di degenza, lungodegenza, rianimazioni, cardiologia, case protette, RSA, sanitarie, privati.

Controindicazioni

L'ausilio è utilizzabile preferibilmente con pazienti allettati.

Dispositivo non adatto per pazienti agitati, psichiatrici, aggressivi, combattivi e con propensione al suicidio.

Utilizzabile con attento controllo medico e paramedico nei pazienti con tubi di drenaggio e/o ferite post-chirurgiche nell'area di posizionamento.

Avvertenze

Lavabile in acqua tiepida max 40 °C con saponi neutri, non è necessario stirare.

Evitare contatto con sostanze infiammabili volatili, solventi, benzina ed altri prodotti simili.

La mancata osservanza delle indicazioni citate può causare un uso improprio del prodotto.

Stoccaggio

Proteggere dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Conservare a temperatura ambiente.

Caratteristiche Tecniche

Materiale Impiegato	Corpo: velour, foam e laccetti in velcro autoagganciante. Fascia avvolgente: bandella in TNT, fascia elastica e velcro di fissaggio
Finitura	Cucitura
Pulizia	Lavabili a max. 40°C con acqua e saponi neutri
Dimensione corpo	Corpo: Lunghezza cm 11,5 - larghezza cm 8,5 - altezza 1,4 cm Laccetti velcro autoagganciante: Lunghezza cm 9 - larghezza cm 1,6
Dimensione fascia avvolgente	TNT: Lunghezza cm 24 - Larghezza cm 5,5 Fascia elastica: cm 9 - Larghezza cm 5 - velcro: Lungh. cm 5 x 3,8 Corpo e fascia avvolgente regolabile per circonferenze arto superiore (zona omerale) variabili da cm 24 a cm 47 cm circa
Confezionamento:	scatola di cartone con 20 pezzi

Modo d'uso



- Posizionare supporto sull'arto superiore, area omerale, curando che non scivoli o non stringa eccessivamente.
- Aprire i laccetti velcro, posizionare la sonda, il tubo o il trasduttore da fissare e richiudere il velcro autoagganciante.
- Controllare periodicamente il corretto posizionamento del dispositivo e dei componenti collegati oltre che la corretta postura del paziente.

LATEX FREE

Dispositivo Medico di Classe I

Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza.
Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483

www.coremec.it

e-mail: coremec@coremec.it



COREMEC s.r.l.

Export Department
e-mail: export@coremec.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti
ST7150_ Edizione _r0_2016