

Transafix®

Kit di fissaggio

Per un fissaggio pratico dei tubi endotracheali



- Impiego semplice e veloce
- Fissaggio sicuro
- Elevata tollerabilità cutanea
- Particolarmente indicato per fissaggi prolungati

Fissaggio veloce, semplice e sicuro grazie alle strisce di Velcro sulla superficie dei cerotti supporto da applicare sulle guance.


E' possibile procedere ad un riposizionamento o alla sostituzione del tubo durante l'intubazione.

Il kit è quindi particolarmente adatto per un fissaggio prolungato.



Cerotti per le guance

- Il prodotto si adatta perfettamente ad ogni volto in quanto il cerotto in TNT è traspirante e flessibile.
- La massa adesiva presenta un'elevata tollerabilità cutanea ed una buona aderenza sulla cute ben detersa.
- I cerotti per le guance con strisce di Velcro vengono applicati facilmente con due semplici movimenti.

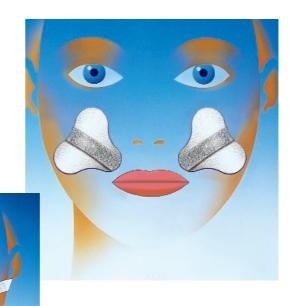



Nastro fissante

- Velcro resistente allo strappo con massa adesiva speciale per il fissaggio sicuro di tubi di diametro fino a mm 16 e lunghi 40 cm.
- La lunghezza lo rende adatto ad ogni volto.
- Il nastro fissante viene avvolto due volte attorno al tubo in corrispondenza della parte adesiva e poi premuto sul Velcro posto sui cerotti.
- Tali caratteristiche garantiscono un fissaggio sicuro.

8700600	Transafix" Kit di fissaggio (2 ceroffi di supporto e 1 nastro) non sterile	50 kit
8700700	Cerotti di supporto non sterili	50 pa
8700800	Nastro di supporto non sterile	50 pz

©Copyright 2002 - Edizione COREMEC s.r.l. SP27_r1_2018 - Riservati tutti i diritti di riproduzione

La Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate

Pubblicazione tecnica scientifica riservata agli operatori del settore. Non diffusa al pubblico.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale e Amministrativa: 10042 NICHELINO (TO) C.so Vittime del Lavoro, 9 Tel. 011.3589481 - Fax 011.3589483 R.E.A.: 626350 - Reg. Impr.: Torino 879/1983 Partita IVA: VAT IT 04327730018



COREMEC s.r.l.

Direzione Commerciale Italia:

E-mail:coremec@coremec.it

web site www.coremec.it